

Genius 1051

专为岛津LC-MS提供的氮气 & 空气发生器

Part Number: 10-9558

Service Kit: 08-4824



您身边的气体发生器专家

简介

Genius 1051专为岛津LCMS-8045, LCMS-8050和LCMS-8060设计, 当LCMS在“标准供气模式”下运行时, Genius 1051可以提供充足的氮气和干燥空气。如果LCMS在“高流量供气模式”下运行时, Genius 3051是最合适的供气方案。


Genius 1051一路输出不含邻苯二甲酸的高纯氮气, 一路输出干燥空气, 两路气体总流量25L/min, 氮气和空气比例可以任意调节, 这套为LCMS-8045, LCMS-8050和LCMS-8060定制的供气方案是经岛津官方测试和认可的。

Genius 10系列的发生器采用变压吸附和碳分子筛技术, 空压机内置系统, 确保提供高性能、分析设备级的氮气。



应用

- ▶ 标准模式下可供1台岛津 LCMS-8045
- ▶ 标准模式下可供1台岛津 LCMS-8050
- ▶ 标准模式下可供1台岛津 LCMS-8060

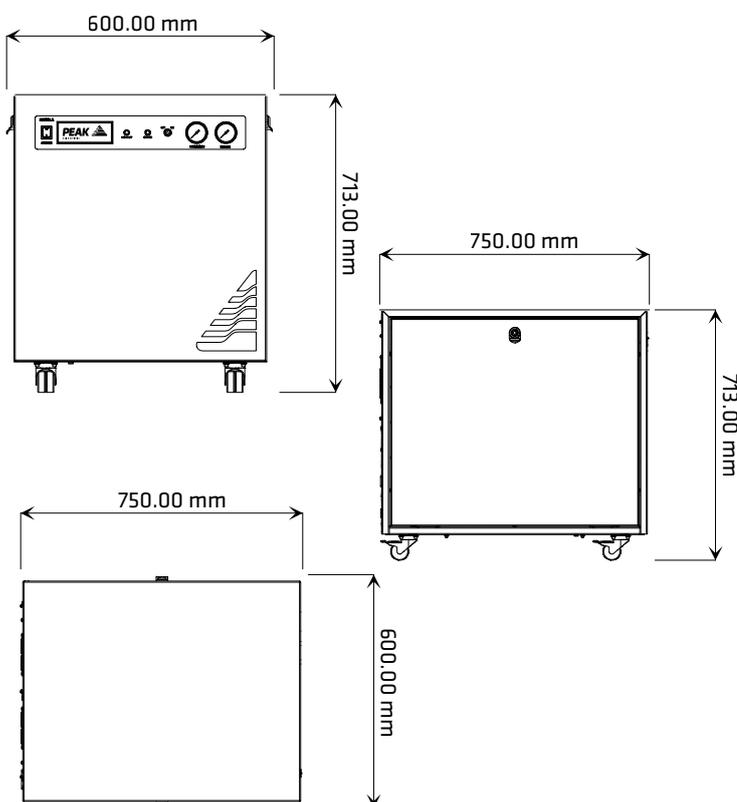

Genius 1051 尺寸

特点

- ▶ 获岛津认可的岛津 LCMS-8050 和8060气体解决方案
- ▶ 内置空压机, 无需外部气体供应
- ▶ 经济的氮气和干燥空气来源, 低廉的终身运行成本
- ▶ 最新一代空压机, 使维护间隔更长
- ▶ 轻按开关, 便可产气
- ▶ 底部滚轮设计, 便于移动
- ▶ 12个月全面现场售后维护

技术参数	Genius 1051
最大流速	空气和氮气合计流量高达25 L/min /0.88 CFM
最大压力	6.9 bar / 100 psi
最大相对湿度	80% Non-Condensing
最高海拔	2000 Metres
邻苯二甲酸盐	< 0.01µm
气体出口	2x 1/4" BSPP
邻苯二甲酸盐	无
悬浮液体	无
工作温度	5°C - 35°C / 41°F - 95°F
电气要求	230v 50/60Hz 7.0A
耗电量	1610 Watts
发生器尺寸 (HxWxD)	713 x 600 x 750 mm/28.1 x 23.6 x 29.5 in
发生器重量	118.5 Kg (261 lbs)

Ordering Information	
Part Number	10-9558
Annual Service	08-4824
标准维护计划	09-3110
全面维护计划	09-3010
208V电压转换器	06-3200

[PEAK Protected]TM

Peak毕克气体重新定义了实验室气体发生器的可靠性、便利性和卓越性能。我们提供长达12个月的保修期。若超过12个月，您的发生器依然会得到【Peak Protected】的专业保障。

我们世界级的售后服务包为您提供定期预防性维护，当发生故障时提供及时的全球技术支持和第一时间现场响应。

毕克气体中国
Tel: 021 50791190
若想了解更多，请登录
Web: www.peakscientific.cn
Email: marketing@peakscientific.com



Product Certifications

