

Precision 气体发生器，精简您的气象色谱工作流程

Precision 是一款集便捷和安全于一体的 实验室气体发生器系统， Precision 的功能满足了气象色谱检测器和载气的需求，只需轻轻一按便可提供氢气、氮气、或零级空气。Precision 可以消除压缩气缸所带来的所有不便和顾虑，精简您实验室的工作流程并提高生产力和效率。



便捷

无需更换气缸也无需担心实验分析到一半时气体用完



安全

无需物料处理也没有泄露和爆炸的风险



连续

气体的质量和纯度保持不变，没有被污染的风险



绿色

通过消除重复的Wgas传递来减少碳排放



高效

精简工作流程，加速样品反应



紧凑


可堆叠、占用空间小、节省实验室空间少碳排放

定制一个Precision 系统来满足你您的实验室需求

Precision系列的亮点是您能灵活的选择您所需的模块来满足您实验室的气相色谱气体的需求。组合模块堆砌在一起能根据您所需的纯度和流速产生多种气体（氢气、氮气和零级空气）氢气发生器和氮气发生器根据纯度不同有两种型号——标准版和Trace版。我们建议大多数GC（例如FID燃气）使用标准版，作为载气的则使用Trace版，提供最低的基线和精确的结果。



混合搭配模块来满足您GC气体的需要

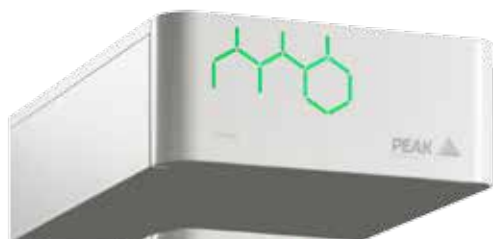

零级空气

- 节约成本的火焰助燃气来源
- 烃含量<0.05ppm
- 1.5L/min - 30L/min




氮气 (TRACE版)

- 提供用于载气和电子捕获检测器的“零级氮气”
- 99.9995% 的纯度, 烃含量<0.05ppm
- 250cc/min - 1L/min



氢气 (TRACE版)

- 提供可持续的替代氮气的载气
- 99.9999% 纯度
- 250cc/min - 500cc/min

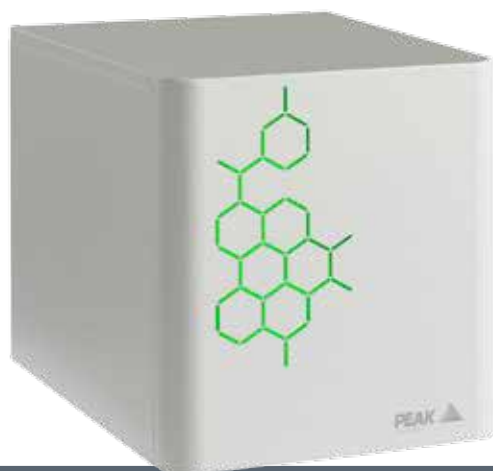

氢气

- 用于探测气体 (如FID)
- 99.9995% 纯度
- 100cc/min - 450cc/min

空气压缩机

- 在单独容器内一台空压机能为氮气和零级空气发生器同时提供压缩空气
- 不占用额外的空间
- 完整的服务保障计划

联系我们，了解更多！

Web: www.peakscientific.cn

Email: marketing@peakscientific.com