

Solaris 10

用于ELSD和小型质谱仪的氮气发生器



您身边的气体发生器专家

简介


Peak Solaris 10氮气发生器采用先进的膜分离技术，专为实验室的HPLC-ELSD或小型质谱仪研发设计。Solaris 10的流速可达10 L/min，纯度可达99.5%，出口压力可根据实际应用调节，最高可达100psi。

Solaris 10继续沿用紧凑、节省空间的设计，可直接置于实验台面。可直接用我们模块化的空压机直接供气，无需外部空气供给；也可直接接到实验室的压缩空气源。



应用

- 可供2x ELSD 检测器
- 可供1x 小型质谱仪
- 热释光计量读出器

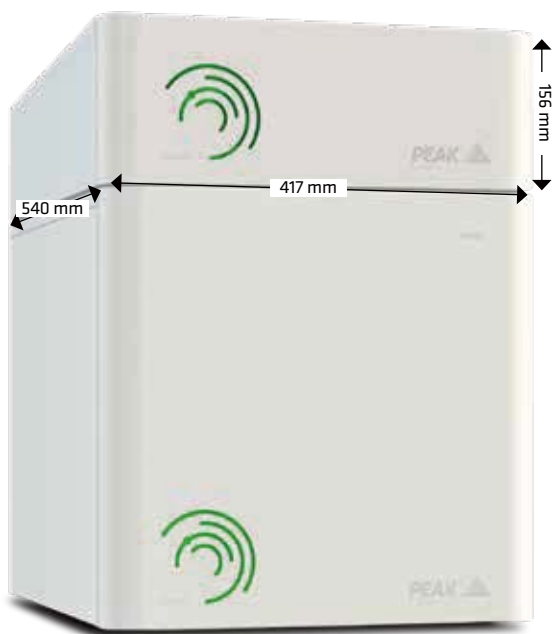

Solaris 10 尺寸

应用

- 流速可达10 L/min, 100 psi，纯度可达99.5%
- 出口流速、纯度和压力可调
- 紧凑型、堆叠式的设计，最大程度地利用实验室宝贵的空间
- 可选配的Solaris空压机模块
- 彩色的LED指示灯，便于状态的识别
- 严格的生产和测试过程，通过CE/FCC认证
- 比压力钢瓶、杜瓦罐或者液氮塔更安全、便利
- 12个月的现场保修
- 全球范围的[Peak Protected]售后服务

技术参数	Solaris 10
最大流速	up to 10 l/min (与入口空气有关)
最大压力	up to 100 psi / 6.9 bar (用户可调)
纯度	up to 99.5%*
气体出口	1 x 1/4 " 母头
最小/最大进气压力	80 psi/ 5.5 bar - 130 psi/ 8.9 bar
最小空气进口流速	30 l/min
最低空气质量	ISO8573 - 1:2010 Class 1.4.1
污染物	无邻苯二甲酸盐或 BHT
悬浮液滴	无
工作温度	5°C - 35°C / 41°F - 95 °F
电气要求	Universal 100-230 VAC / 50/60 Hz / 0.03A
功耗	6.9 Watts
热量输出	25 BTU/Hr
尺寸 H x W x D	156 x 417 x 540 mm / 6.1 x 16.4 x 21.3"
重量	12 kg / 26.4 lbs

订购信息	
货号	65-0001
年度维护计划	08-9013
标准维护计划	09-3010
全面维护计划	09-3010

[PEAK Protected]TM

我们优质的售后服务包为您提供定期预防性维护，当发生故障时提供及时的全球技术支持和第一时间现场响应。

