

Precision 氢气探测器

部件号：10-9010

Service Kit：08-900


PEAK
SCIENTIFIC

专业呵护，触手可及

实验室里，安全是重中之重。Precision 氢气发生器Trace系列配备氢气探测器可确保您在实验室使用氢气时安全无忧。GC在使用过程中，其柱温箱是唯一有可能聚集氢气的地方，Precision氢气探测器通过连接柱温箱来监测其中的氢气含量。氢气一旦聚集，发生器会自动关机，保障实验室安全。

应用

- 适配于毕克Precision 氢气发生器 Trace 型号产品
- 适用于所有GC以监测其柱温箱内的氢气浓度

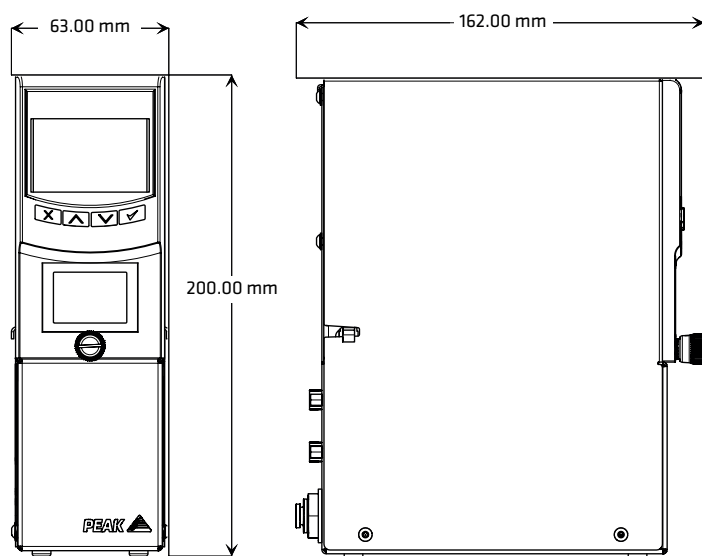

Precision 氢气探测器尺寸

主要特点

- 氢气安全 —— 一旦柱温箱内聚集氢气，会有警报声响起，Precision 氢气发生器也会自动关机
- 可靠 —— 采用成熟的技术设计而成
- 紧凑 —— 体积很小并且可以挂在墙上
- 方便 —— 探测器可即插即用
- 兼容 —— 适用于所有型号的GC
- 便于安装 —— 探测器可便捷地连接到GC和氢气发生器

技术参数	
空气流速	500 cc/min (10in/H ₂ O 最大真空压力)
反应时间	2-30 秒
空气进样点	在空气过滤器内 (标配提供)
报警浓度1	450 ppm
报警浓度 2	900 ppm
用电需求	通过氢气发生器供电
尺寸	6.3 x 16.2 x 20cm (2.5" x 6.4" x 7.9")
重量	1.8kg (3.9lb)

订购须知	
部件号	10-9010
年度服务	08-9003
标准维护计划	09-3110
完整维护计划	09-3010

[**PEAK Protected**]TM

Peak毕克气体重新定义了实验室气体发生器的可靠性、便利性和卓越性能。我们提供长达12个月的保修期。若超过 12 个月，您的发生器依然会得到Peak Protected的专业保障。

我们世界级的售后服务包为您提供定期预防性维护，当发生故障时提供及时的全球技术支持和第一时间现场响应。

毕克气体中国
Tel: 021 50791190

若想了解更多，请登录

Web: www.peakscientific.cn
Email: marketing@peakscientific.com

Peak获得ISO:9001:2008认证



产品资质