

Infinity XE 5010-5040

专用于LC-MS的单路氮气源

Part Number : See Reverse

Service Kit : See Reverse



您身边的气体发生器专家

简介


Infinity XE 50系列气体发生器可以产生10-432L/min的氮气，为多台LC-MS设备提供LC-MS级别的高纯氮气。Infinity XE 5010-5040可以有效满足多台LC-MS同时用气的需求。Infinity系列活动部件少，运行完全静音，故障率少且维护简单。

Peak Infinity XE系列发生器旨在为已配备外部压缩空气源的实验室提供氮气，气源要求最低需满足ISO 8573 - 1:2010 Class 1.4.1质量等级。如果需要，Peak可以提供外置空压机以及前/后过滤处理系统，与发生器一起提供完整的一套解决方案。

备注：对于额外需要干燥空气的质谱，可配备Peak AMD 200空气膜干燥器提供干燥空气源

应用

- LC-MS
- Infinity XE 5010-5040也能为其他应用提供所需氮气，详情可咨询当地Peak

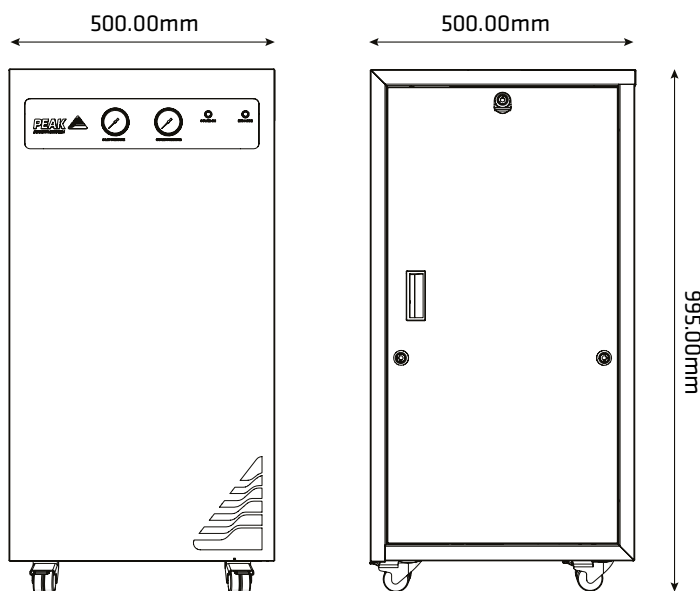

INFINITY XE 5010-5040 尺寸

特点

- 流量范围10-432L/min*
- LC-MS级别氮气
- 应用可靠的膜分离技术
- 紧凑、节省空间的产品设计
- 高效的节能模式，低廉的运营成本
- 英国制造，满足CE/FCC标准
- 尺寸比上一代产品小30% (Infinity 50X0)
- 便于使用，操作和维护都很容易
- 运行时噪音低，震动最小化
- 没有移动部件，可靠的解决方案

* 取决于进气压力、进气/出气流量和进气质量



技术参数	5010	5020	5030	5040
流量范围(L/min)*	up to 432L/min			
纯度*	LC-MS级别氮气			
最大气体输出压力	默认100psi (可调节)			
气源标准	ISO 8573-1:2010 (1:4:1)			
进气压力要求	125psi (8.6 bar) minimum			
电压	100-230 VAC +/- 10%			
频率	50/60 Hz			
电流	0.4A @ 100V / 0.174A @ 230V			
入口接头	C19 (13A)			
电源线(所配套的)	120V NEMA 5-15 (US), 230V BS 1363 (UK), 230V NEMA 6-15 (US), 230V CEE 7 (EU), 100V JIS C 8303 (Japan)			
功耗	40 Watts			
工作温度	5°C - 30°C / 41°F - 86°F			
污染等级	2			
安装类别	II			
尺寸 mm (inches) W x D x H	500 (19.7) x 500 (19.7) x 995 (39.2)			
重量 kg (lbs)	50kg (111lbs)	54kg (120lbs)	59kg (131lbs)	63kg (139lbs)
装船重量 kg (lbs)	66kg (146lbs)	71kg (157lbs)	77kg (170lbs)	82kg (181lbs)

* 取决于进气压力、进气/出气流量和进气质量

订购信息				
Part Number	3300572	3300573	3300574	3300575
Annual Service Kit	请访问: www.peakscientific.cn			
固定价格预防性维护				
标准/全面维护计划				

[PEAK Protected]TM

Peak毕克气体重新定义了实验室气体发生器的可靠性、便利性和卓越性能。我们提供长达12个月的保修期。若超过 12 个月，您的发生器依然会得到【Peak Protected】的专业保障。

我们世界级的售后服务包为您提供定期预防性维护，当发生故障时提供及时的全球技术支持和第一时间现场响应。

毕克气体中国

Tel: 021 50791190

若想了解更多，请登录

Web: www.peakscientific.cn

Email: marketing@peakscientific.com

Peak获得ISO:9001:2008认证



Product Certifications

