

Genius 3051

专用于岛津LCMS的氮空一体机

Part Number : 10-6360

Service Kit : See Reverse



您身边的气体发生器专家

简介


Genius 3051专为岛津LC-MS 8045/50/60和LC-MS 9030设计，即使是在大气量的供应模式下，仍可为质谱提供足够的氮气和干燥空气。

Genius 3051可同时提供27L/min的高纯氮气和29L/min的干燥空气。如果LC-MS 8045/50/8060采用的是标准供气模式，一台发生器甚至可以同时供应两台质谱。

Genius 30系列型号是PEAK内置空压机系列的最大机型。内置四台独立的高性能的空压机，可以供应大流量的分析级别的氮气。

应用

- ▶ 岛津LC-MS 9030
- ▶ 标准供气模式下，可供2x岛津 LCMS-8045
- ▶ 标准供气模式下，可供2x岛津 LCMS-8050
- ▶ 标准供气模式下，可供2x岛津 LCMS-8060
- ▶ 大气量供气模式下，可供1x岛津 LCMS-8045
- ▶ 大气量供气模式下，可供1x岛津 LCMS-8050
- ▶ 大气量供气模式下，可供1x岛津 LCMS-8060
- ▶ 大气量供气模式下，可供1x岛津 LCMS-8060NX

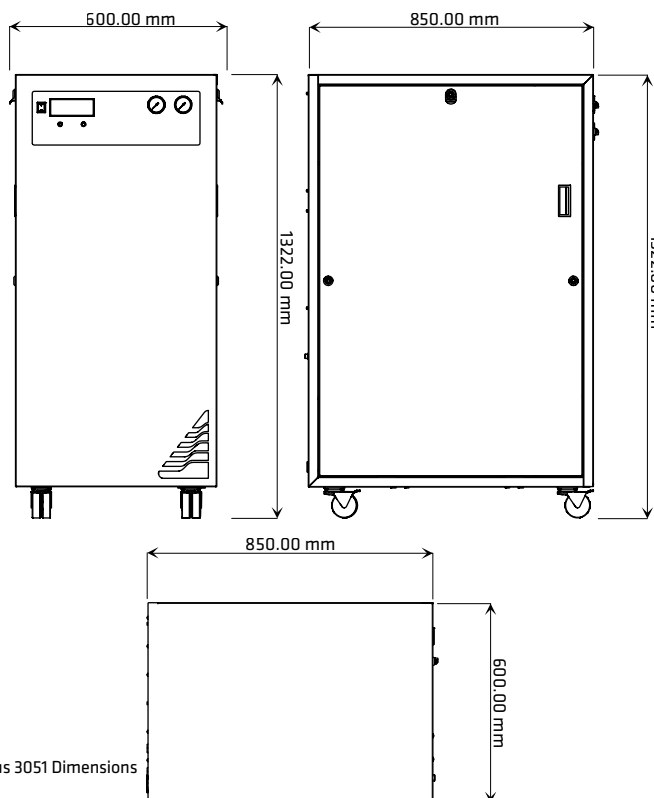

特点

- ▶ 经岛津认证的用于LC-MS 9030的气体解决方案
- ▶ 专为LC-MS-8045/50/60设计
- ▶ 内置集成式空压机，无需外接空气气源
- ▶ 支持LCMS的大气量供气模式
- ▶ 低廉的终身运行成本，经济的氮气/空气气源
- ▶ 最前沿技术确保空压机长时间高效运行
- ▶ 操作简便，只需一个按钮轻松控制
- ▶ 脚轮设计，方便实验室内随意移动
- ▶ 12个月的全面现场保修

技术参数

Genius 3051	
最大流速	27 L/min (0.91 cfm) N2 / 29 L/min (0.70 cfm) Dry Air
最大压力	100 psi / 690 kPa
最大相对湿度	80% 非冷凝
最高海拔	2000米
空气露点	-20°C (-4°F)
氮气纯度	氧气≤2%
颗粒物	无
气体出口	2x 1/4" BSP
邻苯二甲酸盐	无
悬浮液体	无
工作温度	5°C - 35°C / 41°F - 95°F
电器要求	230v单相电, 50/60Hz 12A
功耗	2760 watts
尺寸(HxWxD)	1322 x 600 x 850 mm/ 52.0 x 23.6 x 33.4 in
重量	216 Kg (476lbs)

订购信息

货号	10-6360
年度维护计划	www.peakscientific.cn
标准维护计划	
全面维护计划	
208V 电压转换器	06-3210

[PEAK Protected]TM

Peak毕克气体重新定义了实验室气体发生器的可靠性、便利性和卓越性能。我们提供长达12个月的保修期。若超过12个月，您的发生器依然会得到【Peak Protected】的专业保障。

我们世界级的售后服务包为您提供定期预防性维护，当发生故障时提供及时的全球技术支持和第一时间现场响应。

毕克气体中国
Tel: 021 50791190

若想了解更多，请登录
Web: www.peakscientific.cn
Email: marketing@peakscientific.com

Peak Scientific's Quality Management System conforms to: ISO:9001:2008



Product Certifications

